

Extra-Blatt

...Produktneuheiten

...Highlights

...Blickfang

...Must Have

...News

...Hits



BRILLANT: die Ergebnisse mit der nächsten Generation Zirkoniumdioxid



Mit nur 7 multicolor Farbkompositionen in High Translucent cubic zirconia gestalten Sie 16 VITA® Farben!

Farbtransluzenzen vergleichbar mit Lithiumdisilikat, jedoch eine Biegefestigkeit von > 650 MPa und Kronen-Wandstärken von 0,4 mm im Frontzahnbereich möglich.

SMART: die Idee - der priti®MPguide



Der priti®MPguide High Translucent zeigt die Positionierung in der Ronde. Damit konkretisieren Sie exakt die Zahnfarbe mit dem Zirkoniumdioxid von pritudenta®.

Der priti®MPguide High Translucent:

- ✓ stellt die vollständige Farbauswahl aller ZrO₂ Farben im Rahmen der Multicolor Technologie zur Verfügung.
- ✓ bietet eine Zuordnung zu den beiden Farbsystemen VITA classical® und VITA System 3D-Master®.

CLEVER: MPT-Software MulticolorPositioningTool



Positionierung im oberen Drittel der Ronde.



Positionierung im mittleren Drittel der Ronde.



Positionierung im unteren Drittel der Ronde.

Zu den multicolor Ronden bietet pritudenta® eine Softwareapplikation an. Das ermöglicht eine gezielte Farbeinstellung der Restauration in den Rohlingen.

Die Software simuliert den Farbverlauf der Ronden nach dem Sintern. Dabei wird die Farbwirkung auf die eingeladene CAD-Restauration projiziert. So kann vor dem Fräsen exakt die gewünschte Positionierung, entsprechend der Farbwirkung, festgelegt werden.

AKTUELL: Multicolor-Technologie jetzt auch in Blockform!



Hochästhetische monolithische und vollanatomische Kronen und Brücken bis zu 3 Gliedern.

3 gute Gründe...


... warum pritidenta[®] Ihr Partner im Bereich Zirkon ist.



1 ÄSTHETISCH
Harmonisch abgestimmte Farbverläufe für Top-Ästhetik.
Sie können vollanatomische Arbeiten ohne keramische Schichtung fertigen.

2 SCHNELL
Zeitaufwändige Verfahren wie Tauchen, Bemalen und Trocknen sind nicht mehr erforderlich. Der Sinterprozess kann sofort nach dem Fräsen beginnen. Glasieren oder polieren: fertig!

3 EINFACH
Überzeugende, ästhetische Ergebnisse - wie geschichtet - in wenigen Bearbeitungsschritten! Das ist effizient und ökonomisch.

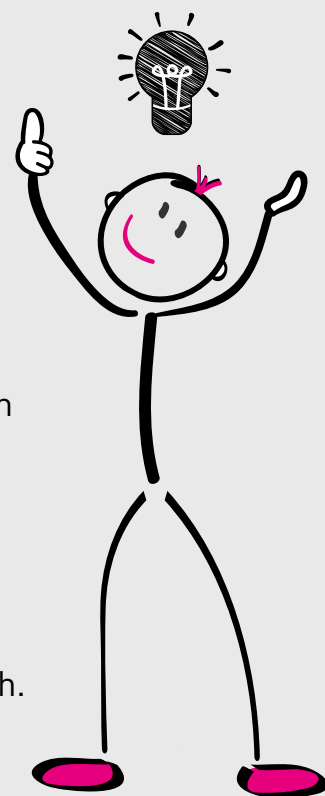

Kundenstimmen



Bastian Heinloth



„Ein echt zuverlässiges Material in Bezug auf Farbe und Präzision. Mit den optimierten Farben bei priti®multidisc ZrO₂ multicolor High Translucent kann ich die Ästhetik auch bei voll-anatomischen Kronen mit Leichtigkeit erreichen! Der MPguide ist dabei wirklich die „Schau“. Tolle Idee für die treffsichere Kommunikation zwischen mir und meinen Zahnärzten. Da stimmt die Farbauswahl!“



**Zahnmedizinisches
Zentrum
Leinfelden**

Justyna Gradzka & Maciej Gradzki



„Mit dem Zirkoniumdioxid High Translucent von pritidenta — den hochtransluzenten Zirkoniumdioxid-multicolor Ronden und der umfassenden Palette können wir unsere Gestaltungsvielfalt bei der Herstellung von ästhetischen, vollanatomischen Restaurationen voll nutzen. Die neuen Farbeinstellungen sind absolut der richtige Schritt! Das hat uns begeistert als wir testen konnten. Wir sind sehr beeindruckt über die Genauigkeit und Trefferquote wie wir mit 7 multicolor Farben und zusätzlichen bleach Farben die 16 VITA Farben nachstellen konnten.“



Roman Dotzauer & Claudia Brettschneider



„Wir sind fasziniert von den Resultaten bei dem neu eingefärbten Zirkonmaterial. Wir als Fräszentrum haben damit die unmittelbare Möglichkeit, direkt die ästhetischen Erwartungen unserer Labore mehr als nur zu erfüllen. Wirklich klasse ist die Treffsicherheit bei der Farbeinstellung. Die Farben stimmen. Mit einem kubisch, hochtransluzenten Zirkonoxid im Frontzahnbereich Einzelkronen mit einer Wandstärke von 0,4 mm anfertigen zu können ...das ist ein deutlicher Vorteil i.S. Werkstoffqualität und Ästhetik. Das hat uns ernsthaft überzeugt. Wir bleiben jetzt dabei!“



Wolfgang Borgmann



„Gerade bei geringen Platzverhältnissen fällt unsere Wahl auf das neue hochtransluzente pritidenta Zirkon. Wir erleben durch den integrierten harmonischen Farbverlauf und die genaue Farbeinstellung, die hervorragend auf die 16 VITA Classical Farben abgestimmt sind, eine sichere und zuverlässigere Farbproduktion. Mit dem MPguide konnten wir die Kommunikation mit unseren Kunden nochmals verbessern und können so den wachsenden ästhetischen Anforderungen in der Vollkeramik gerecht werden.“